

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A termék neve	VIBRA BELT GENIUS
Modell.	MC0179
Bemenet	AC 240V 50Hz or AC 110V 50Hz
Kimenet	DC24V
Elektromos energiafogyasztás	24 W

FONTOS ÚTMUTATÁSOK. ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI ÁTTEKINTÉSRE IS.



Ne szúrjon bele tűket, kápcsokat.



Olvassa el az útmutatót.

Kizárólag a készlet részét képező eredeti adaptert használja! Más adapter használata súlyos személyi sérüléseket és a készülék meghibásodását okozhatja.

Adapter - Modell GPE241-24100W Bemenet : 100-240V ~ 1.0A 47-63Hz

Kimenet: +24V d.c. 1.0A max

Rendszeresen ellenőrizze az adapter és a vezetékek állapotát. Ha a készülék állapotában bármínemű rendellenességet észlel, ne használja azt és a javítást szakszervizben végeztesse.

Megfelel a CE előírásoknak.

Környezetvédelem:

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megromlás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szeméthyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.


A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtelrakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szeméthyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

A gyártó fenntartja a jogot az egyes alkatrészek megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából.

Szerviz

Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes a sajtátkészítő javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett meghibásodásokra.

FIGYELMEZTETÉS

 Ne használja a készüléket 30 percnél hosszabb ideig, ekkor a túlforrósodást megakadályozó biztosíték bekapcsol és automatikusan leállítja a készüléket. A közvetlen használat előtt várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl - legalább 30 perc.



VIBRA BELT GENIUS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

A VIBRA BELT GENIUS egy tökéletesített masszázsvő, amely egyedi oszcillációs masszírozó mozdulatokat produkál, amely a hagyományos terápiás masszázshoz hasonló hatást fejt ki. A **VIBRA BELT GENIUS** felfrissíti a bőrt is. Így mindennapjaink rohanó világában egyaránt felüdülést jelent a testnek és a léleknek is.

VIBRA BELT GENIUS

Segít a zíríregetésben, segíti a limfaticus rendszer működését.

Javítja az emésztőrendszer működését, megtisztítja a bőrt.

Felmelegíti az őv alatti testrészt 31 °C - 60 °C hőmérsékletre, elősegítve ezzel az ideális véráramlást.

Sportmasszázs – Gondoskodik a fő izomcsoportokról, megvéd az izomsérülésektől és meghosszabbítja az aktív sportolási időt.

Pszichoterápia – A hagyományos terápiás masszázs elveit követve.


FIGYELMEZTETÉS

- Terhesség alatt tilos a termék használata.
- Ne használja a terméket, ha trombózisban, szív- és érrendszeri megbetegedésben szenved, vagy gyógyszeres kezelés alatt áll.
- Ha bármilyen rosszullétet, kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ha már nem használja a terméket, mindig áramtalanítsa azt.
- Ne szerelje szét a készüléket és ne végezzen rajta semminemű javítást vagy módosítást. A javításokat kizárólag szakszervizben végeztesse.
- Soha ne használja a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- Ne használja a készüléket, ha a vezeték, az adapter vagy a készülék bármilyen módon meghibásodott.
- Ne használja magas hőmérsékleten és nedves környezetben..

A KÉSZLET RÉSZE:

Fő masszázsegység távirányítóval
Adapter

Funkciógombok a távirányítón

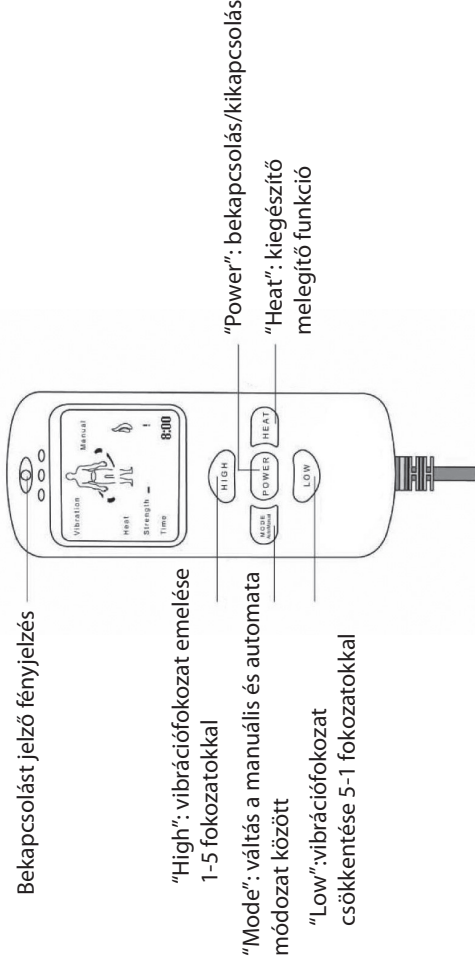

A készülék leírása



Használati útmutató

A VIBRA BELT GENIUS jellemzése

Automatikus mód (automatikus ciklusok 1-5 fokozatig váltakozva)

Manuális mód (1-5 fokozatig - választható)

5 fokozat minden működtetési módnál

Melegítés funkció 31° – 60 °C

Automatikus kikapcsolás funkció 10 perc használat után

"Power": bekapcsolás/kikapcsolás gomb

"Mode": váltás a manuális és automata módozat között

"High": vibrációfokozat emelése 1-5 fokozatokkal

"Low":vibrációfokozat csökkentése 5-1 fokozatokkal

"Heat": kiegészítő melegítő funkció

A készülék használata

- 1) Helyezze az övet arra a testrésze, amelyet masszírozni szeretne, és rögzítse a tépőzárral.
- 2) Csatlakoztassa az adaptert az övhöz.
- 3) Csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz. Mielőtt áram alá helyezné az övet, ellenőrizze. (A hálózati feszültség értéke megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett adatoknak.)
- 4) A készülék áram alá helyezése után, felvillan a narancssárga kontrollégő.
- 5) A készülék használatra kész – ekkor beállítódik a standby és az automatikus mód.
- 5) Ha csupán a melegítés funkció szeretné aktiválni, nyomja meg a **HEAT** gombot. A készülék elkezd melegíteni **31° C – 60° C** tartományon belül, a hőmérséklet percenként emelkedik.
Ez a mód automatikusan kikapcsol 10 perces használat után.
- 6) A vibráció masszázs bekapcsolásához, nyomja meg egyszer a **POWER** gombot, ekkor a készülék automatikus működtetési módban kezd működni. A maunális módba váltáshoz nyomja meg a **MODE** gombot.

Automatikus működtetési mód (ZÖLD kontrollégő világít)

Ebben a módban a készülék automatikusan a 2. fokozaton indul. Az egyes fokozatok automatikusan váltakoznak. Ha az indulási fokozaton szeretne változtatni, nyomja meg a **HIGH** (a fokozat emelése) vagy a **LOW** (a fokozat csökkentése) gombot.

A maximális fokozat 5, a minimális 1. 1 » 2 » 3 » 4 » 5

Manuális működtetési mód (PIROS kontrollégő világít)

Fokozat emelése (HIGH gomb) 1 » 2 » 3 » 4 » 5

Fokozat csökkentése (LOW gomb) 1 « 2 « 3 « 4 « 5

A **LOW** vagy **HIGH** gombok megnyomását sípoló hang kíséri. Amennyiben a gombok megnyomását nem kíséri hangjelzés az annyit jelent, hogy a kívánt fokozat nem elérhető. A működtetési módok közötti váltáshoz nyomja meg a **MODE** gombot.

Biztonsági védelem – Túlforródáselleni védelemérdekében, a készülék 2 szellőzőnyílással is ellátott az öv felső részén.

A készülék automata időzítővel rendelkezik. A **VIBRA BELT GENIUS** automatikusan visszaszámol a készülék bekapcsolása után 10 percről és 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

A készülék működtetése bármikor kikapcsolható a **POWER** gombbal is.

MEGELŐZŐ ÖVINTÉSKEDÉSEK

- Az adapter használat közben enyhén felmelegedhet, ez a folyamat normális.
- Ha már nem használja a készüléket, mindig áramtalanítsa az adaptert.
- A készülék gyermekektől elzárva tárolja.
- A készüléket és tartozékait az eredeti dobozukban tárolja.
- Ne tárolja nedves környezetben és közvetlen napfénynek kitéve.
- Ne rakjon más tárgyakat a készülékre, amelyek károsíthatják a készülék elektronikáját.
- Az öv tisztítása előtt várja meg, amíg teljesen lehűl. Mindig áramtalanítsa! Száras, puha anyagú törölközővel törölje tisztára az öv felületét.
- A termék **NEM MOSHATÓ**. Védje a terméket víztől és nedvesség hatásától.